

# A1c Go


Χρωματογραφία συγγένειας βορονικού οξέος  
Αναλυτής **HbA1c POCT**




Συμπαγές



Πλήρως αυτόματο

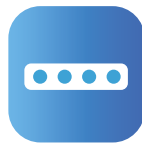

Με βάση την κασέτα

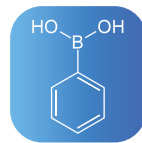

Βορονική συγγένεια



# Χαρακτηριστικά

- Προηγμένη τεχνική: Χρωματογραφία συγγένειας βορονικού οξέος
- Πλήρως αυτόματη λειτουργία ενός βήματος
- Γρήγορη και ακριβής απάντηση των αποτελεσμάτων μέσα σε λίγα λεπτά
- Μικρότερη παρεμβολή από παραλλαγές Hb
- Χωρίς υγρό Διαδρομή: δεν υπάρχει μεταφορά & ελαχιστοποίηση της συντήρησης
- Ο αναλυτής Point-of-Care είναι κατάλληλος για την παροχή έγκαιρης πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο γραφείο του ιατρού.

## Έξυπνη εμφάνιση



224mm(L)\*160mm(W)\*236mm(H)

## Απλοποιημένη λειτουργία

Κάντε κλικ για START

Συλλέξτε δείγμα 5 µL, τοποθετήστε την πιπέτα στη θέση R1.

Τοποθετήστε την κασέτα στο μηχάνημα, ακολουθούμενη από την αυτόματη διαδικασία δοκιμής. Το αποτέλεσμα θα διανεμηθεί σε 5 λεπτά

## Προδιαγραφές

Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη αφής	Μεθοδολογία	Χρωματογραφία συγγένειας βορονικού οξέος
Δοκιμασία	HbA1c, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη	Μέγεθος συσκευασίας	25 kits/box
Όγκος δείγματος	5 µL	Γραμμικό εύρος	3.5-15.0% (NGSP)
Διάστημα	≤5 min	Βαθμονόμηση	Σάρωση κάρτας RFID
CV	≤3%	Διαστάσεις	224mm(L)* 160mm(W)*236mm(H) ≤5 Kg
Επικοινωνίες	Θύρα LAN, USB, σειριακή θύρα		
συνυπολογίσιμο	Cartridge, κάρτα RFID, πιπέτα μίας χρήσης, έλεγχος HbA1c (προαιρετικά)		