

# A1c Go

*Cromatografia di affinità con boronato*


## Analizzatore HbA1c POCT




Compatto



Completamente  
automatico

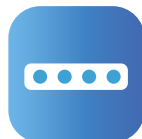

A cartuccia

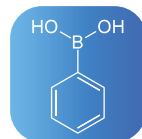

Affinità con il  
boronato



# Caratteristiche

- Tecnica avanzata: Cromatografia di affinità con boronate
- Funzionamento completamente automatico in un solo passaggio
- Risposta rapida e precisa dei risultati in pochi minuti
- Minima interferenza dalle varianti di Hb
- Nessun percorso di liquidi: nessun carryover e manutenzione ridotta al minimo
- L'analizzatore Point-of-Care è adatto per fornire cure primarie tempestive presso lo studio medico

## Sguardo intelligente




Touch screen a colori

RFID per la strisciata della carta


Porta a cartuccia

224mm(L)\*160mm(W)\*236mm(H)


## Funzionamento semplificato

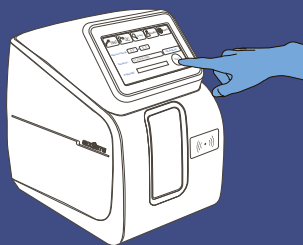

Fare clic per INIZIARE

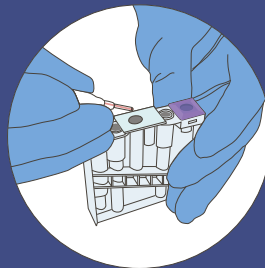

Prelevare un campione di 5  $\mu$ L, inserire la pipetta in posizione R1

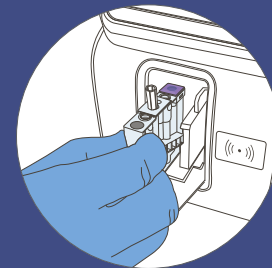

Inserire la cartuccia nella macchina, quindi eseguire automaticamente il processo di test. I risultati vengono comunicati in 5 minuti.

## Specifiche tecniche

Schermo	Touch screen a colori	Metodologia	Cromatografia di affinità con boronato
Test	HbA1c, Emoglobina Glicata	Dimensione della confezione	25 kit/scatola
Volume del campione	5 $\mu$ L	Gamma lineare	3.5-15.0% (NGSP)
Intervallo	$\leq$ 5 min	Calibrazione	RFID per la strisciata della carta
CV	$\leq$ 3%	Dimensioni	224mm(L)*160mm(W)*236mm(H) $\leq$ 5 Kg
Comunicazioni	Porta LAN, USB, porta seriale		
consumabile	Cartuccia, scheda RFID, pipetta monouso, controllo HbA1c (opzionale)		

### CONTACT

**Goldsite Diagnostics Inc.**  
No. 1001, Building No.1,  
GOLDSITE Mansion,  
No. 9 Rongtian Road, Kengzi,  
Pingshan District, Shenzhen,  
China, 518122

☎ 0086 755 2689 0807  
✉ export@goldsite.com.cn  
🌐 en.goldsite.com.cn



@ Goldsite Diagnostics